

**Test za utvrđivanje
trudnoće**
Brzo otkrivanje

- Više od 99 % pouzdan od dana vaše očekivane mjesečnice.
- Pažljivo pročitate ovu brošuru prije testiranja.

1 Prije nego započnete

Možda će vam pomoći ako imate sat ili ručni sat tijekom provođenja testa. Testirati se možete u bilo koje doba dana od dana očekivane mjesečnice.

2 Provedite test

Kada ste spremni za testiranje, uklonite zaštitni omot i skinite čep. Odmah upotrijebite testni štapić.

Možete se testirati izravno iz mlaza mokraće ili iz uzorka mokraće koji ste prikupili u čistu, suhu posudu.

- Držite vrh koji mijenja boju usmjeren prema dolje u mlazu mokraće ili u uzorku prikupljene mokraće, kao što je prikazano, čitavih 5 sekundi.

- Vrh koji mijenja boju brzo će postati ružičast pokazujući da se mokraća upija. **Morate nastaviti držati vrh koji mijenja boju u mokraći čitavih 5 sekundi.**



Morate nastaviti držati vrh koji mijenja boju u mokraći čitavih 5 sekundi.

Počnete mjeriti 5 sekundi čim primijetite da je vrh koji mijenja boju postao ružičast.

Mlaz mokraće **ILI** Prikupljeni uzorak

- Držite vrh koji mijenja boju usmjeren prema dolje ili položite štapić za testiranje na ravnu površinu dok ne budete spremni očitati rezultate i dok se ne pojavi plava crta u kontrolnom prozorčiću.
- Možda biste trebali vratiti čep.
- Ako se boja ne promijeni u potpuno ružičastu, pogledajte 5. pitanje.




PRIČEKAJTE 3 MINUTE. Dok test počinje funkcionirati, primijetiti ćete kako se pojavuje plava crta ili više njih.

3 Očitajte rezultat

Možete očitati svoj rezultat u prozorčiću s rezultatima.

Tijekom očitavanja rezultata, u kontrolnom prozorčiću mora biti vidljiva plava crta. Ova crta pokazuje da je test ispravan.

Rezultat „Trudnoća“ može se pojaviti u roku od 1 minute ako se testirate na dan izostale mjesečnice (to je dan nakon dana očekivanog početka mjesečnice). Pričekajte pune 3 minute za potvrdu rezultata „Nije Trudnoća“ (pogledajte 8. pitanje). Ako u kontrolnom prozorčiću nije prikazana plava crta, test nije uspješno proveden (pogledajte 6. pitanje).

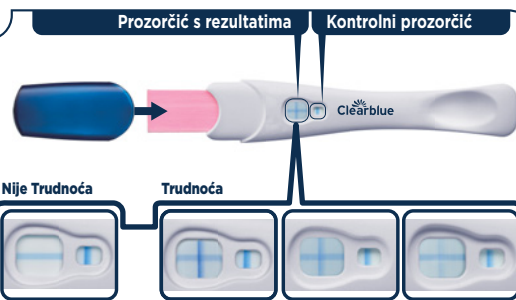

Nije Trudnoća
Ako je rezultat „Nije Trudnoća“, pogledajte 10. pitanje.

Trudnoća

Ako je rezultat „Trudnoća“, pogledajte 11. pitanje. Ako niste sigurni koji je rezultat, pogledajte 7. pitanje.

Nije važno je li jedna od crta koje čine znak „+“ svjetlija ili tamnija od druge; rezultat je „Trudnoća“.

VAŽNO! Očitajte svoj rezultat u roku od **10 minuta** od testiranja. Zanimajte sve promjene rezultata nakon tog vremena.

Pitanja i odgovori

1 Koliko je pouzdan Clearblue?

Clearblue je više od 99 % pouzdan u laboratorijskim testovima, ako se upotrebljava dan nakon očekivanog početka mjesečnice.

2 Kako Clearblue funkcionira?

Kad ste trudni, vaše tijelo proizvodi hormon trudnoće hCG (humani korionski gonadotropin). Količina hCG u vašem tijelu povećava se u ranim stadijima trudnoće. Clearblue Brzo otkrivanje može otkriti vrlo male količine ovog hormona u vašoj mokraći (osjetljivost ovog testa je 25 mIU/ml).

3 Nisam sigurna kada je moja sljedeća očekivana mjesečnica. Kako mogu znati da se testiram u pravo vrijeme?

Kako biste saznali kada je vaša sljedeća očekivana mjesečnica, izračunajte duljinu svojeg uobičajenog ciklusa brojeći dane od prvog dana mjesečnice do dana početka sljedeće mjesečnice.

- Ako imate neuredne cikluse, trebate uzeti u obzir najdulji ciklus u mjesecima prije testiranja.
- Ako je rezultat „Nije Trudnoća“, a svejedno sumnjate da ste trudni, pogledajte 10. pitanje.

4 Mogu li neki lijekovi ili medicinska stanja utjecati na rezultat?

- Prije provođenja testa uvijek pročitate upute proizvođača za sve lijekove koje uzimate
- Lijekovi za plodnost koji sadržavaju hCG mogu dovesti do pogrešnih rezultata (lijekovi za plodnost obično se daju injekcijom, a testiranje ubrzo nakon toga može dati pogrešan rezultat „Trudnoća“).
- Druge terapije za plodnost (kao što je klomifen citrat), lijekovi protiv bolova i hormonalna kontracepcija (npr. kontracepcijska pilula) ne bi trebali utjecati na rezultat.
- Ako ste nedavno prestali uzimati hormonalnu kontracepciju ili rabite terapiju za plodnost, primjerice klomifen citrat, vaše mjesečnice mogu biti neredovite, zbog čega biste mogli testiranje provesti prerano.
- Ako ste nedavno bili trudni (čak i ako trudnoću niste iznijeli do kraja), možete dobiti lažni rezultat „Trudnoća“.
- Izvanmaternična trudnoća, ciste na jajnicima, menopauza i neka vrlo rijetka medicinska stanja mogu dovesti do pogrešnih rezultata.
- Ako imate rezultat „Trudnoća“, moguće je da će vaše kasnije otkriće da niste trudni zbog prirodnog gubitka trudnoće do kojeg može doći u ranim stadijima.

Ako dobijete neočekivane rezultate, trebate ih raspraviti sa svojim liječnikom.

5 Upotrijebila sam test za trudnoću, ali vrh koji mijenja boju nije postao potpuno ružičast. Što učiniti?

Ako vrh koji mijenja boju nije postao potpuno ružičast, možda niste primijenili dovoljno mokraće. Međutim, ako se plava crta pojavi u kontrolnom prozorčiću u roku od 10 minuta nakon provođenja testa, onda je test uspješno proveden. Ako se u kontrolnom prozorčiću ne pojavi plava crta u roku 10 minuta od provođenja testa, pogledajte 6. pitanje.

6 Provela sam test, ali nikakva se plava crta nije pojavila u kontrolnom prozorčiću. Što učiniti?

Ako nema plave crte u kontrolnom prozorčiću u roku od 10 minuta nakon provođenja testa, test nije uspješno proveden. To može biti zbog toga što:

- Vrh koji mijenja boju nije bio usmjeren prema dolje ili štapić za testiranje nije položen na ravnu podlogu nakon što je primijenjena mokraća.
- Upotrijebilo je previše ili premalo mokraće. **Morate uzimati uzorak 5 sekundi.**

Trebate se opet testirati s pomoću novog testnog štapića pritom pazite da slijedite upute. Možete uzeti uzorak mokraće u čistu, suhu posudu i uroniti vrh koji mijenja boju samo 5 sekundi.

7 Što ako nisam sigurna u svoj rezultat?

- Za rezultat „Trudnoća“ mora postojati plava crta u kontrolnom prozorčiću, a znak „+“ u prozorčiću rezultata unutar 10 minuta od provođenja testa.

Pojava znaka „+“ u prozorčiću s rezultatima može varirati, međutim, crte koje čine znak „+“ i crta u kontrolnom prozorčiću trebaju biti slične širine (pogledajte slike A-C).

Slika A

To će se vjerojatnije pojaviti kad ste trudni i testirali ste se nakon više dana od dana izostale mjesečnice jer su razine hCG-a više.

Slika B

To nije neobičajeno kad ste trudni, a testirate se na dan ili malo prije dana izostale mjesečnice, jer su vaše razine hCG-a još uvijek relativno niske.

Slika C

Čak i ako je blijed, ovaj rezultat još uvijek je znak trudnoće. Ako još uvijek niste sigurni oko svog rezultata, trebate pričekati najmanje 3 dana prije ponovnog testiranja, pažeći da slijedite upute.

Za sljedeće korake, informacije i opće savjete povezane s problematikom trudnoće, posjetite našu internetsku stranicu: www.clearblue.com

Za samotestiranje kod kuće. Samo za *in vitro* dijagnostičku uporabu. Nije za internu uporabu. Nemojte ponovno upotrebljavati. Držati izvan dohvata djece. Čuvajte na temperaturi između 2 °C i 30 °C. Ako se čuva u hladnjaku, mora odstajati na sobnoj temperaturi barem 30 minuta prije testiranja. Ne upotrebljavajte ako je zaštitna folija oštećena. Ne upotrebljavajte nakon isteka „roka trajanja“. Odložite s normalnim kućnim otpadom. Nemojte rastavljati proizvod. Sadržava male dijelove. Nemojte pojesti dijelove ovog proizvoda. Ako ih slučajno progutate, potražite medicinsku pomoć.

	Proizvođač		Nemojte ponovno upotrebljavati
	Kód serije		<i>In vitro</i> dijagnostički medicinski uređaj
	Rok trajanja		Temperaturno ograničenje 2 °C - 30 °C

- Kako bi rezultat bio „Nije Trudnoća“, mora postojati plava crta u kontrolnom prozorčiću i znak „-“ (minus) u prozorčiću s rezultatima u roku od 10 minuta nakon provođenja testa. Ako je rezultat „Nije Trudnoća“, a svejedno sumnjate da ste trudni, pogledajte 10. pitanje.

8 Kad mogu očitati rezultat?

Rezultat „Trudnoća“ može se pojaviti čak i nakon 1 minute ako se testirate nakon dana izostale mjesečnice (što je dan nakon što ste očekivali mjesečnicu). Provjerite je li se pojavila plava crta u kontrolnom prozorčiću prije nego što očitavate rezultate. **Pričekajte 3 minute za potvrdu rezultata „Nije Trudnoća“.** Ako se u kontrolnom prozorčiću ne pojavi plava crta u roku **10 minuta** test nije uspješno proveden (pogledajte pitanje 6).

9 Koliko će dugo trajati rezultat?

Rezultat možete očitati bilo kada u razdoblju od 3 do 10 minuta. Nakon 10 minuta, sve promjene rezultata treba zanemariti.

10 Rezultat testa je „Nije Trudnoća“. Što učiniti?

Možda niste trudni, razina hormona trudnoće možda još nije dovoljno visoka da se otkrije ili ste pogrešno izračunali datum kada trebate dobiti mjesečnicu.

- Ako ste se testirali rano, testirajte se ponovno onda kada očekujete mjesečnicu.
- Ako vaša mjesečnica kasni, testirajte se ponovno za 3 dana. Ako vam test prikazuje rezultat „Nije Trudnoća“, a još uvijek niste dobili mjesečnicu, posjetite svojeg liječnika.

11 Rezultat testiranja je „Trudnoća“. Što učiniti?

Ako vaš test prikazuje da ste trudni, trebate posjetiti svojeg liječnika koji vam može pružiti savjet o tome koje sljedeće korake trebate poduzeti.

Distributer: OVLAŠTENI ZASTUPNIK ZA RH: Orbico d.o.o. Koturška 69, Zagreb, Hrvatska. Tel: 01-3444-800; E-mail: info.hr@orbico.com

Distributer za BiH: Italgroup d.o.o. Sarajevo, Stara cesta bb, 71320 Vogošća, BiH 033 580 320, www.italgroup.ba
Registrovano kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH broj 06-074-1-3362-1/15 od 22.06.2015.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Zeneva, Švicarska. Clearblue je žig tvrtke SPD. © 2019. SPD. Sva prava pridržana.

