

## Test za utvrđivanje trudnoće

Ultrarano otkrivanje

- Više od 99 % pouzdan od dana vaše očekivane mjesečnice.
- Prije testiranja pažljivo pročitajte ovu brošuru.

### 1 Kada se testirati



- Testirajte se do 6 dana prije vaše izostale mjesečnice, što je 5 dana prije očekivane mjesečnice.
- Ako se testirate prije očekivane mjesečnice, upotrijebite prvu jutarnju mokraću. U suprotnom, možete se testirati u bilo koje doba dana.
- Nemojte piti mnogo tekućine prije testiranja.

### 2 Provedite test



#### MLAZ MOKRAĆE

Morate nastaviti držati vrh koji mijenja boju u mlazu mokraće punih 5 sekundi.

- Uklonite folijski omotač i skinite čep. Odmah upotrijebite testni štapić.

#### Odaberite metodu testiranja

- **VAŽNO:** Vrh koji mijenja boju brzo će postati ružičast pokazujući da se mokraća upija.


**A** Držite vrh koji mijenja boju pod mlazom mokraće punih 5 sekundi.

**ILI**

**B** Potpuno uronite samo vrh u uzorak svoje mokraće prikupljen u čistu, suhu posudu punih 20 sekundi.

**ILI**

**B**

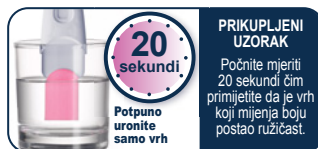

#### PRIKUPLJENI UZORAK

Počnite mjeriti 20 sekundi čim primijetite da je vrh koji mijenja boju postao ružičast.

- Ako vrh koji mijenja boju ne postane potpuno ružičast, pogledajte 7. pitanje.
- Ponovno stavite čep i položite testni štapić na ravnu površinu.
- Počnite mjeriti vrijeme.



**PRIČEKAJTE PUNE 3 MINUTE**  
Prije očitavanja rezultata

### 3 Očitajte rezultat



- Crta u kontrolnom prozorčiću može se pojaviti brzo, no **MORATE** pričekati 3 minute prije nego što očitavate rezultat.
  - Ako u kontrolnom prozorčiću nije prikazana plava crta, test nije uspješno proveden (pogledajte 8. pitanje).
  - Ako je rezultat „**Nije Trudnoća**“, pogledajte 4. pitanje.
  - Ako je rezultat „**Trudnoća**“, pogledajte 3. pitanje.
  - Ako niste sigurni koji je rezultat, pogledajte 9. pitanje.
- VAŽNO!** Očitajte svoj rezultat u roku od **10 minuta** od testiranja. Zanimajte sve promjene rezultata nakon tog vremena.

## Pitanja i odgovori

### 1 Kako Clearblue funkcioniра?

Kad ste trudni, vaše tijelo proizvodi hormon trudnoće hCG (humani korionski gonadotropin). Test može otkriti sitne iznose hCG hormona u vašoj mokraći (osjetljivost testa iznosi 10 mIU/ml).

### 2 Kada se mogu testirati testom Clearblue Test za utvrđivanje trudnoće Ultrarano otkrivanje?

Možete se testirati do 6 dana prije vaše izostale mjesečnice, što je 5 dana prije očekivane mjesečnice. Ako se testirate prije očekivane mjesečnice i dobijete rezultat „Nije Trudnoća“, još uvijek postoji mogućnost da ste trudni. Pogledajte tablicu u nastavku za rezultate laboratorijskog testiranja s ranim uzorcima za trudnoću.

Broj dana prije očekivane mjesečnice	Ultrarano testiranje					
	0	1	2	3	4	5
% uzoraka trudnica koje su dobivale rezultat trudnoća	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	96 %	79 %

### 3 Rezultat testiranja je „Trudnoća“. Što učiniti?

Posjetite liječnika koji će vas savjetovati o vašim sljedećim koracima.

### 4 Moj test pokazuje „Nije Trudnoća“, no i dalje mislim da jeste. Što učiniti?

Možda niste testirali ili razina hCG-a možda još nije dovoljno visoka za otkrivanje ili ste pogrešno izračunali dan očekivane mjesečnice. Ako ste se rano testirali, testirajte se ponovno onda kada očekujete mjesečnicu. Ako vaša mjesečnica kasni, testirajte se ponovno za 3 dana. Ako vam test prikazuje rezultat „Nije Trudnoća“, a još uvijek niste dobili mjesečnicu, posjetite svojeg liječnika.

### 5 Prilikom ranijeg testiranja rezultat je bio „Trudnoća“, ali naknadnim testiranjem dobiven je rezultat „Nije Trudnoća“ ili mi je počela mjesečnica. Što to znači?

Iako je test pouzdan više od 99 % u otkrivanju hormona trudnoće od dana vaše očekivane mjesečnice, moguće je dobiti rezultat trudnoća, a kasnije saznati da niste trudni (tj. kasnije možete dobiti rezultat nije trudnoća ili vam se može javiti mjesečnica). Razlog može biti prirodan gubitak tijekom ranih faza trudnoće, poznat kao „rani gubitak trudnoće“, što nažalost nije neuobičajeno, jer otprilike 1 od 4 trudnoće završe ranim gubitkom trudnoće. Ako dobijete neočekivane rezultate, zatražite savjet liječnika.

### 6 Mogu li neki lijekovi ili medicinska stanja utjecati na rezultat?

Uvijek pročitajte upute proizvođača za sve lijekove koje uzimate prije testiranja.

Lijekovi koji sadržavaju hCG mogu utjecati na rezultat. Izvanmaterična trudnoća i nedavna trudnoća, čak i ako nije iznesena do kraja, mogu uzrokovati zavaravajuće rezultate. Ako ste u ili se približavate menopauzi, možete dobiti lažni rezultat trudnoća čak i ako niste trudna. Na test ne bi trebale utjecati hormonalne terapije koje sadržavaju klomifen citrat, lijekove protiv bolova, alkohol, antibiotike ili kontracepcijske tablete. Ako dobijete neočekivane rezultate, obratite se liječniku.

### 7 Kad sam upotrijebila test, vrh koji mijenja boju nije postao potpuno ružičast. Što učiniti?

Možda niste primijenili dovoljno mokraće. Međutim, ako se u kontrolnom prozorčiću pojavi plava crta u roku 10 minuta od provođenja testa, test je ispravan. Ako se u kontrolnom prozorčiću ne pojavi plava crta u roku 10 minuta od provođenja testa, pogledajte 8. pitanje.

### 8 Provela sam test, ali nikakva se plava crta nije pojavila u kontrolnom prozorčiću. Što učiniti?

Ako je prošlo više od 10 minuta od provođenja testa, test nije ispravan. To može biti zbog toga što:

- Vrh koji mijenja boju nije bio usmjeren prema dolje ili testni štapić nije položen na ravnu površinu nakon što je primijenjena mokraća.
- Upotrijebljeno je previše ili premalo mokraće.

Testirajte se ponovno novim testnim štapićem te se pridržavajte uputa. Možda ćete htjeti prikupiti uzorak mokraće i testirati se metodom „Prikupljenog uzorka“.

### 9 Što ako nisam sigurna u svoj rezultat?

Pogledajte slike u odjeljku „Očitajte rezultat“.

**Slika A:** Vaš rezultat je „Nije Trudnoća“. Ako i dalje smatrate da ste možda trudni, pogledajte 4. pitanje.

**Slike B-D:** Vaš rezultat je „Trudnoća“. Izgled crte u prozorčiću s rezultatima može biti različit, no i dalje je to rezultat „Trudnoća“ bez obzira koliko je crta blijeda ili tamna.

**Slika B:** To je vjerojatnije ako se testirate prije dana očekivane mjesečnice, kada razine hCG-a mogu još uvijek biti poprilično niske.

**Slika C:** To je uobičajeno kada se testirate na dan ili oko dana očekivane mjesečnice.

**Slika D:** To će se vjerojatnije dogoditi ako se testirate više od nekoliko dana nakon dana očekivane mjesečnice, jer su razine hCG-a više.

Ako još uvijek niste sigurni oko svojeg rezultata, trebate pričekati najmanje 3 dana prije ponovnog testiranja, pazite da slijedite upute.

## www.clearblue.com

Za sljedeće korake, informacije i opće savjete povezane s problematikom trudnoće, posjetite našu mrežnu stranicu na: [www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)  
Za samotestiranje kod kuće.

Samo za *in vitro* dijagnostičku uporabu. Nije za internu uporabu. Držati izvan dohvata djece. Čuvajte na temperaturi između 2 °C i 30 °C. Ako se čuva u hladnjaku, mora odstajati na sobnoj temperaturi barem 30 minuta prije testiranja. Ne upotrebljavajte ako je folijski omotač oštećen. Ne upotrebljavajte nakon isteka „roka trajanja“. Odložite sa standardnim kućanskim otpadom. Uređaj nemojte rastavljati. Sadržava sitne dijelove. Nemojte gutati sastavne dijelove ovog uređaja. Ako se slučajno progutaju, potražite medicinsku pomoć.

	Proizvođač		Nemojte ponovno rabiti
	Kod serije		In vitro dijagnostički medicinski uređaj
	Rok trajanja		Ograničenje temperature od 2 °C do 30 °C

CE  
0123



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland.  
Clearblue je robna marka tvrtke SPD. © 2019. SPD. Sva prava pridržana.

Distributer: OVLAŠTENI ZASTUPNIK ZA RH: Orbico d.o.o.  
Koturaška 69, Zagreb, Hrvatska.