
Clearblue

HRVATSKI

Test za brzo otkrivanje trudnoće

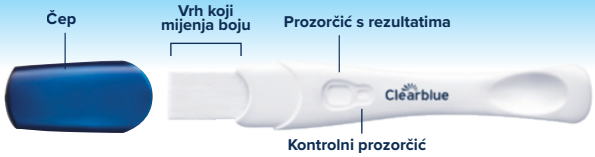

Za samotestiranje. Prije testiranja pažljivo pročitajte ovu brošuru.

Ovaj je proizvod automatizirani kućni proizvod za samotestiranje koji služi za kvalitativnu detekciju humanog korionskog gonadotropina (hCG) u mokraći žene radi utvrđivanja trudnoće. Namijenjen je za upotrebu najranije četiri dana prije očekivane mjesečnice.

Upozorenja i mjere opreza
Upute za uređaj, s otisnutom oznakom „CB11012" na omotu. Za samotestiranje kod kuće. Samo za in vitro dijagnostičku uporabu. Nije za internu uporabu. Nemojte ponovno upotrebljavati. Držati izvan dohvata djece. Čuvajte na temperaturi između 2 °C i 30 °C. Ako se čuva u hladnjaku, mora odstajati na sobnoj temperaturi barem 30 minuta prije testiranja. Ne upotrebljavajte ako je folijski omotač oštećen. Upotrijebite odmah nakon otvaranja folije testnog štapića. Ne upotrebljavajte nakon isteka „roka trajanja". Odložite sa standardnim kućanskim otpadom. Sadržava sitne dijelove. Nemojte stavljati u usta niti jedan dio ovog proizvoda. Ako ga slučajno progutate, potražite zdravstvenu pomoć. Prijavite svaku ozljedu uzrokovanu uporabom ovog proizvoda tvrtki Clearblue i nadležnom tijelu države članice.

Pouzdanost veća od 99 % od dana očekivane mjesečnice

+ ili − Lako čitljivi rezultati

Nemojte piti puno tekućine prije testiranja

Pročitajte rezultate u roku od 10 minuta (10 minuta)

1 Provedite test

Potrebni materijali, koji nisu priloženi: čist, suh spremnik i štoperica. Skinite folijski omotač, skinite čep i odmah ga upotrijebite.



ili



VAŽNO: potpuno uronite vrh kao što je prikazano

Postavite vrh koji mijenja boju na **5 sekundi:**

VAŽNO: vrh koji mijenja boju odmah će postati ružičast, što pokazuje da apsorbira mokraću, ali MORATE nastaviti držati vrh u mokraći punih 5 sekundi.
Zamijenite čep i položite testni štapić na ravnu površinu. Ako vrh ne postane potpuno ružičast, pogledajte odjeljak „Pogreške pri testiranju".

2 Pričekajte

1–3 minute

- Rezultat Trudnoća „+" može se pojaviti za 1 minutu kada se testirate nakon izostanka mjesečnice (dan nakon očekivane mjesečnice).
- Pričekajte 3 minute za potvrdu rezultata Nije Trudnoća „-".

Ako se ne pojave plave linije, pogledajte odjeljak „Pogreške pri testiranju".

3 Rezultati

Trudnoća – ako je vaš rezultat Trudnoća, posjetite svojeg liječnika (pogledajte P1)







Nije Trudnoća (pogledajte P2)



Ako niste sigurni u svoj rezultat, pogledajte P6.

Plava crta mora biti prisutna u kontrolnom prozorčiću da bi vaš rezultat bio valjan. Ako nije, pogledajte „Pogreške pri testiranju".
VAŽNO! Pročitajte rezultat u roku od **10 minuta** od testiranja. Nakon tog vremena zanemarite sve promjene.

? Pitanja i odgovori

1. **Rezultat je Trudnoća. Što trebam učiniti?** Posavjetujte se s liječnikom o sljedećim koracima. Možete dobiti pozitivan rezultat i kasnije saznati da više niste trudni (vidi P7).
2. **Moj je rezultat Nije Trudnoća. Što to znači?** Možda niste trudni ili razina hormona trudnoće možda još nije dovoljno visoka da bi se mogla otkriti. Testirajte se ponovno za tri dana. Ako ovaj test pokaže rezultat „Nije Trudnoća", a kasni vam mjesečnica, obratite se svojem liječniku.
3. **Nisam sigurna kad trebam dobiti sljedeću mjesečnicu. Kako da znam testiram li se u ispravno vrijeme?** Kako biste izračunali kad trebate dobiti mjesečnicu, izračunajte uobičajeno trajanje svojeg ciklusa brojanjem dana od prvog dana mjesečnice do dana prije početka sljedeće mjesečnice. Ako imate neredovite cikluse, prije testiranja trebate izračunati najdulji ciklus u prethodnih nekoliko mjeseci.
4. **Kako funkcionira Clearblue?** Detektira hCG u mokraći nakon primjene uzorka. Vizualni rezultati pokazuju je li hCG otkriven pozdanošću većom od 99 % od dana očekivane mjesečnice.
5. **Mogu li neki lijekovi ili zdravstvena stanja utjecati na rezultat?** Prije testiranja uvijek pročitajte upute proizvođača za sve lijekove koje uzimate.
   Lijekovi koji sadrže hCG i određena rijetka zdravstvena stanja mogu uzrokovati lažno pozitivne rezultate. Izvanmaternična trudnoća ili nedavna trudnoća, čak i ako nije iznesena do kraja, mogu uzrokovati zavaravajuće rezultate.
   Ako ste u menopauzi ili se približavate menopauzi, možete dobiti lažno pozitivan rezultat na trudnoću čak i ako niste trudni.
   Na test **NE** bi trebale utjecati hormonalne terapije koje sadržavaju klomifen citrat, lijekovi protiv bolova, alkohol, antibiotici ili kontracepcijske tablete. Ako dobijete neočekivane rezultate, trebate o njima razgovarati sa svojim liječnikom.
6. **Što ako nisam sigurna u rezultat?** Za rezultat „Trudnoća" mora postojati plava crta u kontrolnom prozorčiću i znak „+" u prozorčiću rezultata u roku od 10 minuta od testiranja.
   Rezultat „Trudnoća"
   Slika A: To će se vjerojatnije pojaviti kad ste trudni i testirali ste se nakon više od nekoliko dana od dana izostale mjesečnice jer su razine hCG-a više.
   Slika B: To možete vidjeti ako se testirate oko dana očekivane mjesečnice jer razine hCG-a mogu biti relativno niske.
   Slika C: To još uvijek označava rezultat „Trudnoća".
   Nije važno je li jedna od crta koje čine znak „+" svjetlija ili tamnija od druge; rezultat je „Trudnoća".
   Kako bi rezultat bio „Nije Trudnoća", mora postojati plava crta u kontrolnom prozorčiću i znak „-" u prozorčiću s rezultatima u roku od 10 minuta nakon testiranja.
   Ako još uvijek niste sigurni u svoj rezultat, trebate pričekati najmanje 3 dana prije ponovnog testiranja, pritom pažljivo slijedeći upute.
7. **Prilikom ranijeg testiranja rezultat je bio „Trudnoća", ali naknadnim testiranjem dobiven je rezultat „Nije trudnoća" ili mi je počela mjesečnica. Što to znači?** Možete dobiti pozitivan rezultat i kasnije saznati da više niste trudni. To može biti zbog ranog gubitka trudnoće, što nije neuobičajeno, a utječe na oko 1 od 4 trudnoće. Većina žena nakon toga može imati zdravu trudnoću.
8. **Postoji li nešto što bih trebala učiniti ako planiram zatrudnjeti?** Dobro je razgovarati s liječnikom prije nego što pokušate zatrudnjeti. Mnogi liječnici savjetuju uzimanje folne kiseline ili prenatalnih vitaminskih dodataka, izbjegavanje alkohola i prestanak pušenja te održavanje zdrave tjelesne težine, što može biti korisno. Također možete razmotriti korištenje testa za utvrđivanje ovulacije kako biste identificirali svoje najplodnije dane. Clearblue nudi asortiman proizvoda koji će vam pomoći da povećate šanse za začeće.

! Pogreške pri testiranju

Vrh koji mijenja boju nije postao potpuno ružičast.
Možda niste primijenili dovoljno mokraće. Međutim, možete biti sigurni da je test uspio ako se kontrolna linija pojavi u roku od 10 minuta od testiranja.
U kontrolnom prozorčiću ne pojavljuje se plava linija u roku od 10 minuta od testiranja.
Test nije uspio, vjerojatno zato što je korišteno previše ili premalo mokraće. Ponovno se testirajte koristeći novi test, pažljivo prateći upute.



www.clearblue.com

Karakteristike učinkovitosti
Klinička učinkovitost:
Testiranje kliničke učinkovitosti pokazalo je da je uređaj > 99 % točan u određivanju statusa trudnoće od dana očekivane mjesečnice.
- Uređaj je bio > 99 % točan u odnosu na status trudnoće laika koji su upotrijebili test (testirano na 120 žena).
- U ispitivanju u kojem je testirano 600 uzoraka proizvod je bio > 99 % točan od dana očekivane mjesečnice.
- Ispitivanje kliničke specifičnosti s uzorcima prije, na prijelazu i nakon menopauze (600 uzoraka) potvrdilo je ≥ 99 % specifičnosti.

Analitička učinkovitost:
Analitička specifičnost utvrđena je ispitivanjem proizvoda s potencijalno interferirajućim ili unakrsno reagirajućim tvarima. Rezultati su potvrdili da visoke koncentracije tih tvari ne utječu na performanse uređaja. Na performanse uređaja ne utječu ni visoke razine beta jezgre hCG fragmenta, vrlo visoke razine netaknutog hCG-a, raspon specifične gravitacije ili pH vrijednost mokraće. Ispitivanje preciznosti pokazalo je da je analitička osjetljivost proizvoda 25 mIU/ml.

IVD	In vitro dijagnostički medicinski proizvod	LOT	Šifra serije
	Proizvođač		Rok trajanja
	Nemojte ponovno upotrebljavati		Ograničenje temperature 2°C – 30°C
EU REP	Ovlašteni predstavnik u Europskoj uniji		

Literatura

1. Perrier d'Hauterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Gnoth C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.

Distributer:/ Shpërndarë nga: /Дистрибутор: OVLAŠTENI ZASTUPNIK ZA RH: Orbico d.o.o. Koturaška 69, Zagreb, Hrvatska/Kroaci/Хърватия
Tel: 01-3444-800; E-mail: info.hr@orbico.com
Distributer za BiH: Italgroup d.o.o. Sarajevo, Stara cesta bb, 71320 Vogošća, BiH 033 580 320, www.italgroup.ba

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švicarska.

Clearblue je zaštitni znak tvrtke SPD. © 2026 SPD. Sva prava pridržana.

2300785.00 06-2026 0123